



S100 PRO
EXPERT CARE



Hướng dẫn sử dụng

V1.0


MỤC LỤC

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của P/S.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu trữ bản hướng dẫn này để tham khảo khi cần.

Giới thiệu sản phẩm	1
Hướng dẫn chải răng	2
Hướng dẫn sử dụng	3
Các loại đầu bàn chải	4
Các chế độ chải răng	5
Hướng dẫn sạc pin cho thiết bị	6
Bảo quản thiết bị	7
Thông số kỹ thuật	8
Các lưu ý quan trọng về an toàn	9
Các lưu ý an toàn về pin	10
Lỗi thiết bị	11
Xử lý và tái chế	12
Bảo hành	12

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

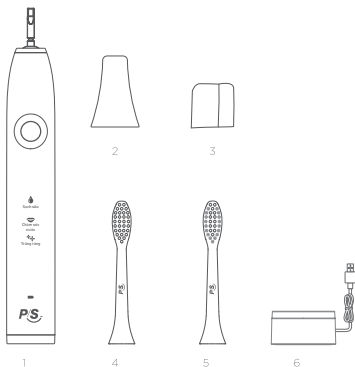

Số thứ tự	1	2	3	4	5	6
Bộ phận	Thân bàn chải	Màng bọc trực bàn chải	Nắp đậy đầu bàn chải	Đầu lông chải sạch sâu	Đầu lông chải trắng răng tự nhiên	Đế sạc cảm ứng
Số lượng	1	1	2	1	1	1


i Vui lòng kiểm tra kỹ số lượng các phụ kiện đi kèm.

HƯỚNG DẪN CHẢI RĂNG


P/S khuyến khích chải răng hai lần trong một ngày, mỗi lần chải tối thiểu 2 phút theo khuyến nghị của nha sĩ. Các bước chải răng đúng cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe răng miệng.



Tháo màng bọc trực bàn chải theo đúng hướng dẫn.

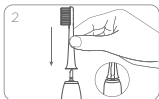

Giữ mặt trước của đầu bàn chải và mặt trước của phần thân bàn chải theo cùng một hướng.

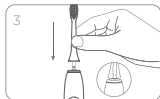

Gắn đầu bàn chải vào trục theo đúng hướng và giữ một khoảng cách vừa đủ giữa thân bàn chải và đầu bàn chải.



Cho kem đánh răng lên đầu bàn chải. Sau đó, làm ướt đầu bàn chải và cho vào miệng trước khi khởi động để tránh kem đánh răng bắn ra bên ngoài.



Di chuyển bàn chải nhẹ nhàng theo góc 45 độ giữa lông bàn chải và viền nướu.



Chế độ hẹn giờ thông minh: Thiết bị sẽ ngừng rung sau mỗi 30 giây để nhắc bạn di chuyển từ vùng răng này tới vùng răng kế tiếp, nhằm đảm bảo toàn bộ hàm răng được vệ sinh. Thiết bị sẽ ngừng sau 2 phút chải răng theo khuyến nghị của nha sĩ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bật/Tắt

Nhấn nút nguồn một lần để khởi động bàn chải điện.


Nhấn nút nguồn một lần nữa sau khi thiết bị đã khởi động ít nhất 10 giây để tắt.

Chuyển chế độ

Khi bàn chải điện được khởi động ở một chế độ nhất định, nhấn nút nguồn trong vòng 10 giây để chuyển sang chế độ khác.

Chức năng ghi nhớ

Bàn chải điện sẽ ghi nhớ chế độ được sử dụng cuối cùng và tự động bật chế độ này ở lần khởi động tiếp theo.

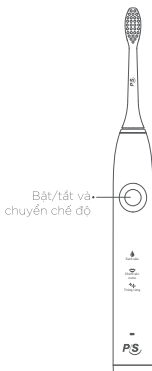

CÁC LOẠI ĐẦU BÀN CHẢI

Đầu bàn chải Sạch Sâu

Lông bàn chải phủ baking soda giúp loại bỏ mảng bám trên răng, mang đến trải nghiệm sạch vượt trội.

Lông chải chỉ thị màu: Đầu lông chải sẽ bạc màu sau khoảng 3 tháng sử dụng để nhắc nhở đã tới lúc cần thay bàn chải mới.

Theo khuyến nghị nha sĩ - Thay bàn chải 3 tháng 1 lần.

Đầu bàn chải Trắng Răng Tự Nhiên

Lông chải xoắn kép giúp chải sạch vết ố trên răng vượt trội, mà vẫn mềm dịu cho nướu.

Lông chải chỉ thị màu: Đầu lông chải sẽ bạc màu sau khoảng 3 tháng sử dụng để nhắc nhở đã tới lúc cần thay bàn chải mới.

Theo khuyến nghị nha sĩ - Thay bàn chải 3 tháng 1 lần.

Hình ảnh của đầu bàn chải:



Đầu bàn chải
Sạch Sâu



Đầu bàn chải
Trắng Răng
Tự Nhiên


i Lưu ý: Xem thông tin đầu bàn chải tại mặt phía sau của bao bì sản phẩm.

CÁC CHẾ ĐỘ CHẢI RĂNG

3 chế độ chải răng phù hợp với nhu cầu chăm sóc răng miệng: Sạch sâu, chăm sóc nướu, trắng răng.

Chọn chế độ chải phù hợp bằng cách nhấn nút nguồn. Bạn có thể chuyển đổi giữa 3 chế độ: Sạch sâu, chăm sóc nướu, và trắng răng.


- Chế độ sạch sâu: 33,000 lần/phút
- Chế độ chăm sóc nướu: 32,000-33,000 lần/phút
- Chế độ trắng răng: 27,000-38,000 lần/phút

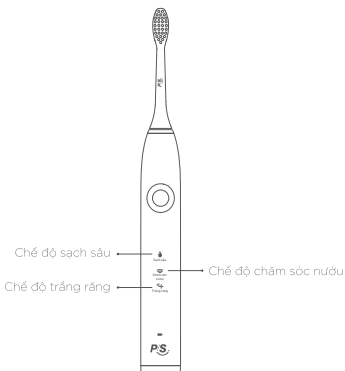

HƯỚNG DẪN SẠC PIN CHO THIẾT BỊ

- Trước lần sử dụng đầu tiên, vui lòng sạc đầy pin cho bàn chải điện trong trường hợp pin yếu hoặc hết pin. Ở những lần tiếp theo, bàn chải điện có thể được sạc bất cứ lúc nào và với bất cứ mức pin nào.
 - Đảm bảo bàn chải khô ráo trước khi sạc pin.
 - Vui lòng sạc đầy pin theo hướng dẫn trong trường hợp không sử dụng bàn chải trong hơn 6 tháng.
 - Nhắc nhở nguồn điện yếu: Vui lòng sạc pin khi thiết bị rung 3 lần và đèn chỉ thị sạc chuyển sang màu đỏ.
 - Kết nối cáp USB vào nguồn điện và đặt bàn chải điện vào đế sạc để bắt đầu quá trình sạc.
 - Trong quá trình sạc thiết bị: đèn chỉ thị sạc nhấp nháy đỏ cho biết thiết bị đang trong quá trình sạc. Đèn chỉ thị sạc chuyển sang màu xanh khi quá trình sạc điện kết thúc.
 - Trong trường hợp bạn không sạc bàn chải trong một thời gian dài, đèn chỉ thị sạc có thể phải mất 6 tới 10 phút mới sáng lên. Đây là điều bình thường.
- i** Khi sạc, vui lòng để sản phẩm tránh xa nguồn nước để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Thời gian sạc 5 giờ là dữ liệu được đo đạc trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên thời gian sạc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sạc.

Biểu đồ sạc pin:

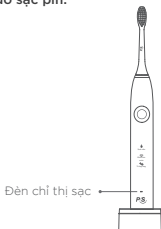

Điện áp định mức
5V=



Sạc nhanh 5 giờ



30 ngày pin

Công ty TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

LÔ A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

<https://www.unilever.com.vn/>

Tư vấn khách hàng: ĐT: (028) 38236651

Zalo: Unilever Chăm Sóc Khách Hàng

Email: tuvankhachhang@unilever.com

BẢO QUẢN THIẾT BỊ



VỆ SINH ĐẦU BÀN CHẢI

- Rửa sạch đầu bàn chải và lông bàn chải sau mỗi lần sử dụng.
- Để khô tự nhiên. Không kéo lông bàn chải để tránh bị biến dạng và rơi ra.



VỆ SINH THÂN BÀN CHẢI

- Lau sạch bàn chải bằng vải mềm và để khô tự nhiên.
- Không ngâm thiết bị trong nước.
- Không rửa bàn chải với nước nóng trên 40 độ.
- Không sử dụng hóa chất để vệ sinh bàn chải.



VỆ SINH BỘ SẠC

- Sử dụng vải mềm để lau đi các vết bẩn trên đế sạc.
- Trước khi vệ sinh đế sạc, hãy rút nguồn điện để đảm bảo an toàn.



THAY ĐẦU BÀN CHẢI

- Thay đầu bàn chải 3 tháng một lần theo khuyến nghị của nha sĩ.

i Vệ sinh thường xuyên để duy trì sản phẩm luôn trong tình trạng tốt và kéo dài thời gian sử dụng.

Vui lòng tham khảo “Các lưu ý quan trọng về an toàn” trước khi vệ sinh sản phẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Bàn chải điện P/S S100 PRO EXPERT CARE

Model sản phẩm: LBT-203542C

Tiêu chuẩn giám sát: CE, ROHS, REACH, IPX7, IEC, ISO

Thân bàn chải

Điện áp định mức: 3.7V =

Công suất định mức: 1.8W

Dung lượng pin: 700mAh

Thành phần: PC, ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IPX7

Chiều dài bàn chải (không kể đế sạc): $243.4 \pm 1\text{mm}$

Đế sạc

Đầu vào: 5V=1A

Công suất định mức: 1.6W

Đầu bàn chải Sạch Sâu

Thành phần : PP, Nylon

Chiều dài đầu bàn chải: $83 \pm 1\text{ mm}$

Chất liệu lông: lông chải phủ baking soda và lông chải chỉ thị màu.

Đầu bàn chải Trắng Răng Tự Nhiên

Thành phần : PP, Nylon

Chiều dài đầu bàn chải: $83 \pm 1\text{ mm}$

Chất liệu lông: lông chải xoắn kép và lông chải chỉ thị màu.

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

⊗ **Nguy hiểm!**

- Ngưng sử dụng nếu thiết bị bị hư hỏng. Thiết bị này không có bộ phận tự bảo dưỡng. Nếu thiết bị bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hãy liên hệ với trung tâm Chăm sóc khách hàng.
- Để sạc cắm ứng chỉ tương thích với bàn chải điện P/S S100 PRO EXPERT CARE. Vui lòng không đặt điện thoại di động, kim loại hoặc các vật lạ khác vào vị trí sạc cắm ứng để ngăn ngừa thiệt hại cho cá nhân và sản phẩm.
- Không sử dụng các thiết bị sạc khác cho bàn chải điện này để tránh gây thiệt hại cho sản phẩm.
- Không sạc pin tại những nơi ẩm ướt như nhà tắm.
- Không đặt bộ sạc trên hoặc gần nơi có nước như bồn tắm, bồn rửa, v.v.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, ngưng sử dụng bộ sạc ngay lập tức để tránh nguy hiểm.

⚠ **Cảnh báo!**

- Vui lòng không sử dụng bất kỳ đầu bàn chải hoặc bộ sạc nào khác ngoài các phụ tùng có trong hộp này, hoặc được Unilever khuyến nghị.
- Chỉ đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho Bàn chải điện P/S S100 PRO EXPERT CARE được sử dụng cho sản phẩm này.
- Thiết bị này được thiết kế để làm sạch răng, lưỡi và nướu. Vui lòng không sử dụng cho các mục đích khác.
- P/S S100 PRO EXPERT CARE là thiết bị chăm sóc cá nhân, không sử dụng chung cho nhiều bệnh nhân tại phòng khám nha khoa hoặc cơ sở y tế.
- Để bảo đảm an toàn, trẻ em và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức liên quan cần sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát hoặc hướng dẫn.
- Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Vui lòng không làm sạch đầu bàn chải, tay cầm hoặc bộ sạc trong máy rửa chén.
- Nên giữ lại nắp bảo vệ trên đầu bàn chải trong suốt quá trình sử dụng.
- Để bàn chải và bộ sạc xa tầm tay trẻ em.

① **Chú ý!**

Các trường hợp dưới đây không nên sử dụng thiết bị và cần tham khảo ý kiến của Nha sĩ:

1. Những người vừa trải qua phẫu thuật răng miệng hoặc điều trị trong 2 tháng gần đây hoặc đang trong quá trình điều trị.
 2. Những người có vấn đề tương tự khác (bao gồm răng giả hoặc nướu bị chảy máu nhiều, v.v.) hoặc có các triệu chứng trong miệng (bao gồm hàm giả không ổn định hoặc chảy máu nhiều liên tục ở lợi);
 3. Những người có mô miệng nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
- Bạn có thể bị chảy máu nhẹ ở nướu trong vài ngày đầu sử dụng. Tình trạng này sẽ chấm dứt sau vài ngày. Tham khảo ý kiến của nha sĩ nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn sau 2 tuần sử dụng hoặc bạn cảm thấy không thoải mái hoặc đau nhức khi sử dụng sản phẩm này.
 - Không để sản phẩm tiếp xúc với các sản phẩm chăm sóc tóc (như gelatin, dầu dưỡng) hoặc nước rửa tay, nhằm tránh hư hại bề mặt bàn chải.
 - Vui lòng ngắt nguồn điện khi không sử dụng ổ cắm sạc hoặc trước khi vệ sinh sản phẩm.

CÁC LƯU Ý AN TOÀN VỀ PIN

- Vui lòng tránh để dây dẫn kim loại tiếp xúc với các cực của pin hoặc tiếp xúc với điểm cuối của pin, để tránh đoản mạch pin và thương tích vật lý như bỏng do pin quá nóng.
- Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các thiết bị tỏa nhiệt như dưới ánh nắng mặt trời, lò sưởi, lò vi sóng hoặc máy nước nóng. Pin có thể phát nổ khi quá nóng.
- Không tháo rời hoặc lắp lại pin, bỏ bất kỳ vật lạ nào hoặc bỏ nước/chất lỏng khác vào trong, để tránh rò rỉ pin, pin quá nóng, cháy hoặc phát nổ.
- Trong trường hợp rò rỉ pin, hãy bảo vệ mắt và da khỏi chất lỏng bị rò rỉ. Rửa sạch với nước và đến ngay trạm y tế gần nhất để được chữa trị nếu da hoặc mắt đã tiếp xúc.
- Vui lòng không ném pin vào lửa, có thể dẫn đến hỏa hoạn và cháy nổ.
- Không vứt bỏ bàn chải đã qua sử dụng xử lý pin như rác thải sinh hoạt.
- Pin có thể phát nổ nếu xử lý không đúng cách. Vui lòng đem sản phẩm đã qua sử dụng tới các điểm thu hồi pin.
- Không làm rơi, bóp hoặc làm thủng pin. Tránh để pin tiếp xúc với những nơi có áp suất bên ngoài quá mức, có thể dẫn đến đoản mạch bên trong và làm pin quá nóng.

LỖI THIẾT BỊ

Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Xử Lý	Ghi chú
Cường độ rung yếu.	- Bàn chải bị ấn mạnh vào răng. - Đầu bàn chải không được đặt đúng cách trên tay cầm.	- Ấn nhẹ đầu bàn chải vào răng. - Đặt lại đầu bàn chải theo hướng đúng với tay cầm.	Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Unilever nếu bạn gặp phải các vấn đề khác.
Bàn chải chỉ sử dụng trong thời gian ngắn ngay cả khi đã được sạc pin.	Pin của bàn chải sắp hết.	- Bàn chải chưa được sạc đầy. - Bàn chải đã được sử dụng trên 6 tháng. - Pin đã đạt đến tuổi thọ sử dụng.	
Bàn chải ngưng hoạt động. Bàn chải không hoạt động.	- Bàn chải không có điện. - Bàn chải bị lỗi.	Vui lòng sạc bàn chải và kiểm tra đèn chỉ thị sạc.	

Tư vấn khách hàng Unilever

ĐT: (028) 38236651

Zalo: Unilever Chăm Sóc Khách Hàng

Email: tuvankhachhang@unilever.com

XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ

Sản phẩm này có chứa pin lithium, chất thải điện có thể tái chế. Để bảo vệ môi trường, vui lòng không xử lý cùng rác thải sinh hoạt. Vui lòng đem sản phẩm đã qua sử dụng tới các điểm thu hồi pin.



TÊN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT NGUY HIỂM TRONG SẢN PHẨM

Tên và hàm lượng các chất nguy hiểm trong sản phẩm						
Thành phần	Chất độc hại					
	Plumbum (Pb)	Hydrargyrum (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr6+)	Polybrominate biphenyl (PBB)	Polybrominate diphenyl ether (PBDE)
Thành phần cấu trúc	O	O	O	O	O	O
Bảng mạch lắp ráp*	X	O	O	O	O	O
Pin	X	O	O	O	O	O
Linh kiện hỗ trợ	O	O	O	O	O	O

* Bảng mạch lắp ráp bao gồm bảng mạch in và các thành phần điện tử của nó như điện trở, tụ điện và chip tích hợp.

Ghi chú:

Bảng này được dựa trên SJ/T11364-2014 Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử

O: Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần đáp ứng các yêu cầu trong quy định GB/T26572-2011. Các quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử.

X: cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của thành phần vượt quá giới hạn quy định GB/T26572-2011. Các quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử.

Các mục được đánh dấu "X" ở trên không thể thay thế hoặc giảm bớt, hạn chế bởi công nghệ trong ngành trên toàn thế giới.

BẢO HÀNH

- Khách hàng kích hoạt bảo hành một đối một trong vòng 30 ngày tại website <https://www.psvietnam.vn/>. Trong thời hạn bảo hành, sản phẩm có các lỗi kỹ thuật hay lỗi sản xuất, chúng tôi sẽ đổi sản phẩm mới miễn phí.
- Bảo hành không bao gồm: hư hỏng do sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng, hao mòn tự nhiên và rụng rớt thông thường đặc biệt nơi đầu bàn chải, các khiếm khuyết có ảnh hưởng không đáng kể đến giá trị hoặc hoạt động của thiết bị. Bảo hành sẽ trở nên vô hiệu nếu bất kỳ việc sửa chữa nào được thực hiện bởi những bên không có thẩm quyền và nếu sản phẩm được sử dụng với các phụ kiện không phải do Unilever cung cấp. .
- Để sử dụng dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ đến bộ phận tư vấn khách hàng của Unilever hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng tại nơi bạn mua sản phẩm. Lưu ý, bạn cần xuất trình chứng từ mua hàng và thông tin xác nhận đăng ký bảo hành chính thức từ nhãn hàng P/S trên website chính thức <https://www.psvietnam.vn/>.